



激活你的人生

激活细胞



WHIEDA - AKTIVÁTOR BUNIEK

Pokročilá technológia,
ktorá zmení svet!




„PRÍRODNÉ SILY V NÁS SÚ SKUTOČNÝMI LIEČITEĽMI CHORÔB“

V 80. rokoch americkí vedci objavili frekvenciu, ktorá zodpovedá vibračnej frekvencii ľudských buniek - terahertzové vlny. Terahertz osciluje na rovnakej frekvencii ako normálne ľudské bunky a generuje milióny vibrácií za sekundu.

Naše ľudské telo tiež generuje terahertzové frekvencie. Dojčatá vyžarujú viac, zatiaľ čo starší a chorí vyžarujú menej a slabšie terahertzové frekvencie.

**"Ak existuje spôsob, ako
zahriať kosti, potom sa dajú
liečiť všetky choroby"**


Hippokrates

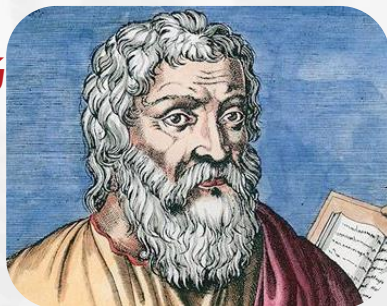

"VŠETKO SÚ VIBRÁCIE,,

Významné slová, dokázané vo svojej hĺbke nespočetnými vedeckými štúdiami, potvrdené vo svojej platnosti ako základný predpoklad pre všetok život, ako "najmenšia zložka" elementárnej častice. Všetko, čo je, má svoju vlastnú charakteristickú frekvenciu. Silný, slabý, fyziologický, patologický.

Frekvencie a vibračné vzorce možno priradiť všetkým živým procesom a klinickým obrazom.

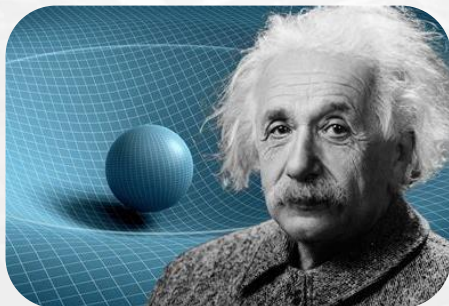

***"Medicína budúcnosti
bude liekom frekvencií"***

Albert Einstein

TERAHERTZ

JE 10 NAJLEPŠÍCH INOVATÍVNYCH TECHNOLOGIÍ, KTORÉ MÔŽU ZMENIŤ SVET

Terahertzové vlny „**svetla života**“ môžu rýchlo preniknúť do ľudského tela do hĺbky 20 centimetrov a ...

NIČIA NEZDRAVÉ BUNKY

Energia terahertzovej frekvencie rezonuje s našimi normálnymi bunkami. Všetky abnormálne alebo mutované bunky sa absorbujú a eliminujú.

AKTIVUJÚ SPIACE BUNKY

Terahertzová frekvencia absorbuje a aktivuje bunky s miernou teplotou, čím eliminuje spiace bunky.

PODPORUJÚ SAMOLIEČENIE

Terahertzová frekvencia indukuje a posilňuje DNA a organické molekuly a rezonuje s našimi bunkami, čím podporuje samoliečenie.

UVOĽŇUJÚ MERIDIÁNY A LYMFU

Uvoľňuje meridiány, stimuluje akupunktúrne body, čistí krv a podporuje metabolizmus.

ZLEPŠUJÚ MIKROCIRKULÁCIU

Terahertzová frekvencia rozširuje cievy, znižuje odpor prietoku krvi a viskozity

REGULUJÚ ŽLÁZY

Reguluje činnosť endokrinných žliaz a chráni naše orgány

ELIMINUJÚ TELESNÚ VLNKOSŤ

Odstraňuje nezdravú telesnú vlhkosť a vyrovnáva imunitný systém tela

ZLEPŠUJÚ KRVNÝ OBEH

Odstraňuje krvné nečistoty, čistí vnútorný krvný obeh a odstraňuje blokády, zmäkčuje cievy a hrčky.

**JE JEDNODUCHŠIE A LACNEJŠIE
UDRŽIAVAŤ ZDRAVIE
AKO BOJOVAŤ S CHOROBAMI**

JEDNA HODINA PRÁCE S AKTIVÁTOROM BUNIEK WHIEDA SA ROVNÁ



30-krát Gua Sha masáž



40 masáží



20-krát banková terapia



10-krát akupunktúra

OBNOVTE SVOJE VZÁCNÉ ZDRAVIE POMOCOU AKTIVÁTORA BUNIEK WHIEDA:

V súčasnosti ľudia na celom svete čelia rôznym zdravotným krízam, ktoré zahŕňajú štyri „desať najsmrteľnejších chorôb“, ako sú kardiovaskulárne ochorenia, COPD, pľúcny emfyzém, rakovina. Svetové štatistiky ukazujú, že 54 % populácie čelí smrteľným následkom týchto chorôb. Dôvodom, prečo ľudia trpia chronickými chorobami, je to, že sa zdá byť čoraz ťažšie liečiť choroby prírodnými prostriedkami a že ich možno často zmierniť a/alebo kontrolovať len liekmi.

Bunky sú hlavnou príčinou väčšiny chorôb a to je spojené s bunkovým deficitom.

Porucha telesných funkcií je spôsobená slabým imunitným systémom, upchatými cievami, poškodenými a zmutovanými bunkami atď.

To všetko sú príčiny závažných chorôb.

VÝSKUMY UKAZUJÚ, ŽE AKTIVÁTOR BUNIEK WHIEDA,
T. J. TERAHERTZOVÉ FREKVENCIE,
JE ÚPLNE BEZPEČNÝ
PRE ABSORPCIU ĽUDSKÝM TELOM!

AKTIVÁTOR BUNIEK WHIEDA JE PRODUKTOM PRE NOVÚ ÉRU ZDRAVIA A POHODY.

Frekvencia **terahertzových vln** je medzi infračerveným a mikrovlnným žiarením, s vlnovou dĺžkou medzi 30 a 3000 mikrónmi, čo je rovnaká vlnová dĺžka absorbovaná ľudskými bunkami.

Keď sú bunky ožiarené terahertzovými frekvenciami, energia v ľudskom tele sa rýchlo zvyšuje a inertné bunky sa aktivujú. Energia žiarenia je len jedna štyridsiatina slnečného svetla a jedna tisícina frekvencie mobilného telefónu.

Prienik terahertzovej frekvencie je schopný dosiahnuť 20 - 30 cm pod kožou, vnútornými orgánmi a kostným jadrom, v dôsledku čoho sa krvné cievy a lymfa v tele neustále uvoľňujú a čistia. Týmto spôsobom sa súčasne zlepšuje mikrocirkulácia, vyživuje sa pokožka, opravujú sa nezdravé alebo poškodené miesta, eliminuje sa nekróza, liečia sa vnútorné orgány a bunky sa ďalej posilňujú.

JEDEN AKTIVÁTOR BUNIEK WHIEDA NA DOMÁCNOSŤ PRINÁŠA ŽIVOT DO KAŽDÉHO DOMU!

Certifikované, uznané a patentované Čínskou akadémiou vied a Sinochem. Zariadenie môže používať ktokoľvek vrátane malých detí.

Nevyžadujú sa žiadne špeciálne zručnosti ani znalosti. Jednoducho fúknite na oblasť, ktorá vám je nepríjemná. Zariadenie sa používa špeciálne na terapeutické a fyzioterapeutické ošetrenia.



**Nádcha, faryngitída,
gastritída, gynekologické
zápaly, prostata atď.**



**Bolesti ramien a krku,
bolesti kĺbov,
bolesti chrbta,
bolesti hlavy,
dysmenorea, ischias
atď.**



A JE VHODNÝ PRE:



Rôzne zablokovania

Meridiánové blokády,
lymfatické blokády, kŕčové
žily, cukrovka a vysoký krvný
tlak atď.



Krása pleti

Akné, jazvy po akné, škvrny,
boj proti starnutiu, krása,
rôzne kožné choroby atď.

NEODPORÚČA SA PRE :



Ľudia
s akútnym ochorením



Ľudia s implantátmi,
otvorenými ranami a
zlomeninami



Tehotné ženy a ženy
so silnou menštruáciou



Ľudia s vrodenými
srdcovými chybami

7 FUNKCIÍ AKTIVÁTORA BUNIEK WHIEDA

1. IDENTIFIKÁCIA

- Dokáže odhaliť blokády, zápaly a nádory v našom tele
- V problematických partiách je cítiť bolesť, pálenie a mravčenie
- Podľa tradičnej čínskej medicíny: blokáda spôsobuje bolesť, bez bolesti znamená bez blokády

🌀 Princíp: Terahertzová frekvencia dokáže preniknúť cez pokožku do vzdialenosti 20-30 cm. To jej umožňuje dosiahnuť kostnú dreň. Zablokované oblasti budú bolestivé.

2. ODSTRÁNENIE NEZDRAVÝCH BUNIEK

- Po určitom čase používania bunkového aktivátora sa všetky abnormálne alebo zmutované bunky absorbujú, eliminujú a bolesť postupne ustupuje.

🌀 Princíp: Vibrácie terahertzových vln sú rovnaké ako vibrácie našich normálnych buniek, abnormálne alebo zmutované bunky absorbujú veľkú časť terahertzovej energie a budú eliminované. Pred použitím bunkového aktivátora sa odporúča vypiť 1-2 poháre teplej vody, ktorá pomáha odstrániť toxíny z tela.

3. AKTIVÁCIA POMALÝCH BUNIEK

– Terahertzová frekvencia absorbuje a aktivuje bunky pri miernej teplote, čím eliminuje neaktívne bunky. Po použití aktivátora buniek sa telo bude cítiť príjemnejšie a plnšie energie.

☞ Princíp: Normálne bunky absorbujú terahertzovú energiu a mierne zvýšia svoju teplotu, neaktívne bunky sa aktivujú - Podľa starogréckeho otca medicíny Hippokrata sa všetky choroby dajú liečiť, ak existuje spôsob, ako zahriať kosti.

4. OPRAVA POŠKODENÝCH BUNIEK ZVYŠUJE REGENERÁCIU

– Každodenná aplikácia aktivátora buniek na určité časti tela podporuje regeneráciu našich buniek. Terahertzová frekvencia znižuje a posilňuje DNA a organické molekuly a rezonuje s našimi bunkami.

☞ Princíp: Terahertzová frekvencia má rovnakú rezonanciu s normálnymi bunkami, Indukuje a posilňuje organické molekuly DNA tým, že zvyšuje samoopravu telesných buniek.

5. ČISTÍ LYMFATICKÝ SYSTÉM - ČISTÍ MERIDIÁNY A LYMFU

– Aplikácia bunkového aktivátora v lymfatických oblastiach pomáha vyčistiť krvné nečistoty a vnútro tela, zlepšiť krvný obeh, odstrániť krvné zrazeniny a zmäkčiť naše cievy. Terahertzové frekvencie uvoľňujú meridiány, stimulujú akupunktúrne body, čistia krv a zvyšujú metabolizmus.

🌀 Princíp: Terahertzová vlna rozširuje naše cievy, znižuje odpor prietoku krvi a viskozitu, zlepšuje krvný obeh a predchádza chorobám.

6. ČISTÍ MERIDIÁNY A ZLEPŠUJE MIKROCIRKULÁCIU

– Stimuluje akupunktúrne body, zlepšuje cirkuláciu energie, krvného obehu a zvyšuje rýchlosť metabolizmu. Terahertzové frekvencie rozširujú cievy, znižujú odpor a viskozitu krvného toku

🌀 Princíp: Terahertzová frekvencia rezonuje s našimi normálnymi bunkami, zlepšuje krvný obeh, čistí meridiány a posilňuje naše telo.

7. REGULUJE ŽĽAZY A ODSTRAŇUJE VHLKOŠŤ Z TEĽA

– Terahertzové frekvencie regulujú endokrinné žľazy a chránia naše orgány. Aplikáciou na naše telo sa eliminuje zbytočná telesná vlhkosť a vyrovnáva sa kyslá a zásaditá rovnováha nášho tela.

⚙️ Princíp: Normálne bunky ľahko absorbujú terahertzovú energiu a mierne zvýšia teplotu, aby sa naše telo zahrialo a odstráni sa nezdravá telesná vlhkosť.




TENTO PRÍSTROJ BY MAL BYŤ
V KAŽDEJ DOMÁCNOSTI.

JE IDEÁLNY NA KAŽDODENNÉ
POUŽÍVANIE PRE CELÚ
RODINU.

AKO SA POUŽÍVA AKTIVÁTOR BUNIEK WHIEDA?

- 1. Pred a po ošetrení vždy vypite 1-2 poháre teplej vody ošetrenej bunkovým aktivátorom.**
2. Je možné aplikovať aktivátor priamo na pokožku, alebo aj cez oblečenie.
3. Ak sú krvné bunky zdravé, zlepšuje sa krvný obeh. Tým pádom sa účinne prenáša kyslík a živiny do ostatných buniek a zároveň sa vyplavujú toxíny a odumreté bunky.
4. Keď sú meridiánové bunky zdravé, nervový systém je odblokovaný. Orgány sa môžu vyživovať a opäť fungovať normálne a efektívne. Bolesť pomaly ustupuje.
5. Niekoľko hodín po ošetrení sa odporúča udržiavať v teple, nejesť studené jedlo a nesparchovať sa studenou vodou. Po ošetrení nepoužívajte ventilátor ani klimatizáciu.

6. Najskôr 1 až 3 minúty za sebou zohrievajte 10 bodov, aby ste zahriali telo. Potom dlhšie ošetrujte bolestivé alebo choré miesto.

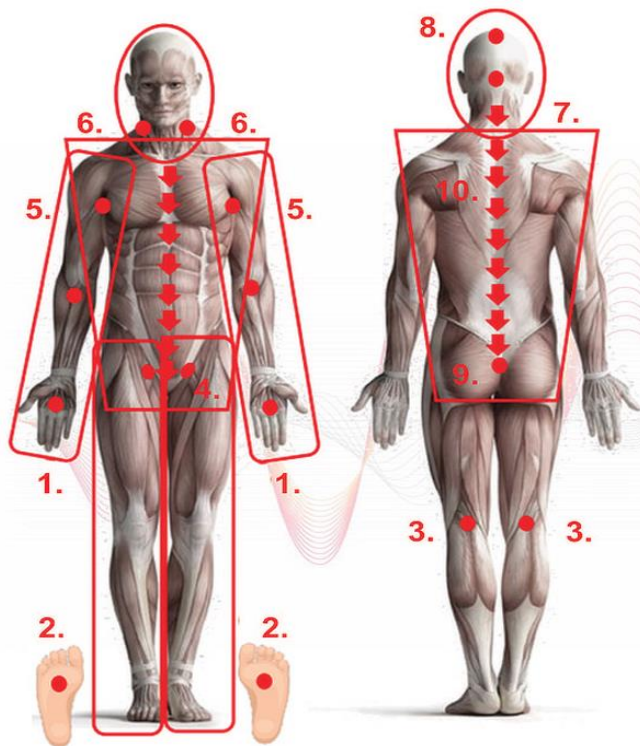

1. a 2.

Predná a zadná strana oboch rúk a chodidiel

3. Obe zadné časti kolien

4. Oblasť slabín

5. Podpazušie

6. Krčné lymfatické uzliny

7. Krčná chrbtica v oblasti chrbta v smere šípky

8. Hlava (vynechajte, ak máte vysoký krvný tlak)

9. Kostrč v oblasti chrbta

10. Chrbtica v smere šípky

1. BOLESTI HLAVY

Pokiaľ ide o krčnú chrbticu, fúkajte najskôr na krk, potom na hlavu. Fúkajte celé rameno a krk 20 minút a potom ušnú lymfu a hlavu 25 minút, spolu 45 minút. (Môžete pociťovať príznaky bolesti hlavy alebo nespavosti, čo už naznačuje zlepšenie)



2. PROBLÉMY S VLASMI

Najprv fúkajte 20 minút na krk a celý chrbát, potom 20 minút na obličky, zadnú a prednú časť žalúdka a oblasť sleziny a potom 20 minút na hlavu. spolu 60 minút.



3. TVÁR :

Na reguláciu vnútorných orgánov fúkajte 25 minút na krk a celý chrbát. Potom na tvár po dobu 20 minút, celkom 45 minút

4. OČI :

Fúkajte na krk, chrbát a oblasť pečene v strede pása 20 minút a potom fúkajte na oči 25 minút, spolu 45 minút





5. BOLESTI ZUBOV/ÚSTNY VRED :

Najprv fúkajte do oblasti hrdla, prednej a zadnej časti pľúc po dobu 25 minút a potom do oblasti bolesti zubov/vredov po dobu 20 minút, spolu 45 minút.

6. BOLEŠŤ HRDLA/KAŠEĽ :

Najprv 20 minút fúkajte na oblasť hrdla, prednú a zadnú časť pľúc, potom 20 minút fúkajte na celé hrdlo a lymfatické cievy hrdla a potom 5 minút fúkajte do otvorených úst.





7. NÁDCHA/PROBLÉMY S NOSOM:

Najprv 25 minút ošetrujete oblasť krku, 25 minút prednú a zadnú časť pľúc, potom 20 minút fúkajte okolo nosa.

8. STUDENÝ/KVAPKAJÚCI NOS:

Najprv si 20 minút fúkajte do krku a chrbta, potom 25 minút do prednej a zadnej časti pľúc a nakoniec 15 minút do nosa.





9. HORÚČKA :

Fúkajte na dlane, chodidlá, prednú časť hrudníka, chrbát, krčnú chrbticu a hlavu 5-7 minút, celkovo 30-40 minút.

10. PROBLÉMY S PRSNÍKAMI :

Najskôr 20 minút fúkajte na krk a celý chrbát, potom na lopatky, potom 20 minút na podpažusnú lymfu a nakoniec 20 minút na oblasť hrudníka (ak máte hyperpláziu prsníkov, môžete ich počas fúkania masírovať.)





11. PROBLÉMY S RAMENAMI A KRKOM :

Fúkajte dlane a chodidlá 15 minút, krk a celé rameno 30 minút, celkovo 45 minút.
(Necitlivosť a bolesť prstov a rúk sú zvyčajne problémy krčnej chrbtice. Potom pokračujte vo fúkaní prstov a rúk)


12. BRONCHITÍDA/ASTMA:

Najprv fúkajte na krk a chrbát 20 minút, potom na prednú a zadnú časť pľúc 20 minút, nakoniec fúkajte na krk a nos 20 minút.



13. Gastrointestinálna fyzioterapia sleziny :

Najprv fúkajte na krk a celý chrbát 25 minút, potom fúkajte na oblasť sleziny a žalúdka 20 minút, celkovo 45 minút **(nepoužívajte, ak žalúdok krváca)**.

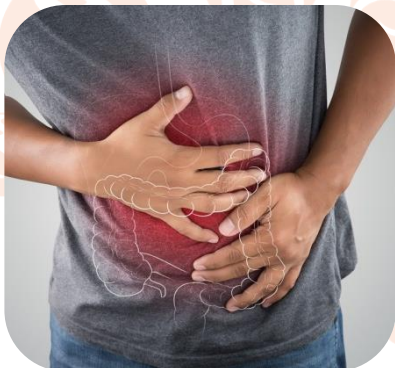

14. ZÁPCHA, ČREVNÉ PROBLÉMY :

Najprv fúkajte celý chrbát, potom oblasť pľúc 20 minút a nakoniec celú prednú časť brucha 25 minút, spolu 45 minút.

15. ŽENSKÉ GYNEKOLOGICKÉ PROBLÉMY :

Najprv fúkajte celý zadok a pás, viac na bod Ming men 30 minút, potom fúkajte predné slabiny a podbruško 10 minút. Nakoniec nastavte aktivátor na nízku úroveň, aby ste 20 minút fúkali na perineum. (Výtok, zmena menštruačného cyklu sú príznakmi liečebných účinkov)



16. BOLEŠŤ DOLNEJ ČASTI CHRBTA :

Fúkajte na dlane a chodidlá 10 minút, potom na celý chrbát a krk 20 minút a nakoniec na bolestivé miesto 20 minút, celkom 50 minút.






17. MUŽSKÝ POHLAVNÝ ORGÁN, PROBLÉMY S PROSTATOU :

Najprv fúkajte na celý pás a oblasť obličiek, viac na Ming men bod po dobu 30 minút, potom fúkať predné slabiny a podbruško po dobu 10 minút a nakoniec fúkajte na perineum v stoji počas 20 minút. Na tento účel nastavte aktivátor na nízku úroveň.

18. LIEČBA HEMOROIDOV :

Na reguláciu vnútorných orgánov najprv 20 minút fúkajte na celý chrbát, posilnite oblasť pľúc, potom 20 minút fúkajte na hemoroidy, 20 minút fúkajte na dlane a chodidlá.

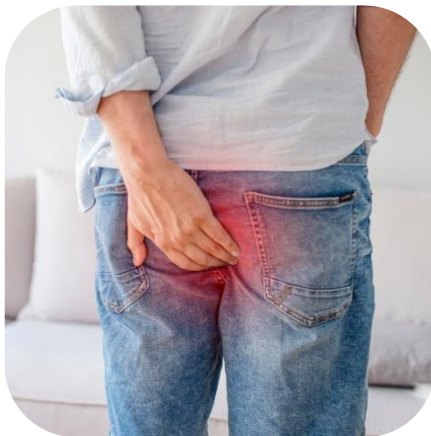



19. PLESNE NÔH A ONYCHOMYKÓZA :

Najprv fúkajte 30 minút na chrbát, posilnite tým oblasť pečene a žlčníka, a potom fúkajte 30 minút na chodidlá, spolu 60 minút.

20. PROBLÉMY S POKOŽKOU:

Najskôr fúkajte na celý chrbát, viac na oblasť pľúc a potom na problematické oblasti pokožky počas 20-30 minút.
(Počas tohto procesu pokožka viac svrbí, môžu sa objaviť vyrážky, ide o hojivý účinok)





21. PROBLÉM S RANAMI :

Jednoducho fúkajte na ranu (nie na krvácajúcu ranu) krúživými pohybmi po dobu 15 minút. 2 ~ 3 krát denne

22. NESPAVOŠŤ A ZLÝ SPÁNOK :

Najprv fúkajte na ramená, krk a chrbát 25 minút, potom fúkajte na celú hlavu 25 minút, spolu 50 minút.





23. ZÁPÁL MANDLÍ (BOLEŠŤ HRDLA):

Najskôr 20 minút fúkajte na ramená a krk, potom 25 minút fúkajte priamo do hrdla, vdychujte a vydychujte.

(Ak máte počas procesu horúčku a viac výtoku z nosa, ide o normálny liečebný účinok, pokračujte v terapii)

24. HYPERTYREÓZA:

Najprv 25 minút fúkajte do krku, prednej a zadnej časti pečene, potom 25 minút do oblasti hypertyreózy

(počas procesu sa môžu objaviť vyrážky, začervenanie a teplo ako normálne detoxikačné príznaky).





25. KRČOVÉ ŽILY :

Najprv fúkajte 10 minút na dlane a chodidlá, potom 25 minút na celý chrbát, a nakoniec fúkajte na krčové žily 25 minút (svrbenie, vyrážky sú príznakmi zlepšenia)

26. DNA:

Najprv fúkajte do dlaní a chodidiel 10 minút, potom fúkajte celý chrbát viac do oblasti sleziny, žalúdka, pečene, žlčníka a obličiek 25 minút, potom fúkajte do bolestivej oblasti 25 minút, (fúkanie, bolesť v inej oblasti je znakom zlepšenia)





27. REUMATICKÁ BOLEŠŤ KÍBOV :

Najprv fúkajte na dlane a chodidlá 10 minút, potom na celý chrbát 20 minút a potom fúkajte na všetky kĺby 30 minút, najmä na bolestivé kĺby
(ak sa objavia vyrážky a je to bolestivejšie, je to zlepšujúci účinok)

28. OBEZITA, ZNÍŽENIE HMOTNOSTI A HYDRATÁCIA :

Najprv fúkajte na dlane a chodidlá 10 minút. Potom fúkajte na celý chrbát, viac na oblasť sleziny, žalúdka, pečene a žlčníka 25 minút a potom fúkajte na prednú časť brucha, obe stehná 25 minút.





29. VYSOKÝ KRVNÝ TLAK :

Najprv fúkajte na dlane a vonkajšie strany rúk 30 minút, potom 30 minút fúkajte na chodidlo a vnútornú stranu chodidiel, ak je to lepšie, fúkajte 30 minút na chrbát.

Poznámka: Ak máte v prvom týždni vysoký krvný tlak, nefúkajte na hlavu, ale dole na chrbát. Keď fúkate smerom nahor, viac sa potíte a krvný obeh sa zrýchli.

30. CUKOR V KRVI :

Najprv fúkajte na dlane a vonkajšie strany rúk po dobu 30 minút, potom fúkajte na chodidlá a vnútorné strany chodidiel po dobu 30 minút, potom fúkajte na prednú strednú časť tela od brady po močový mechúr, zhora nadol po dobu 30 minút (Poznámka: Doba terapie pri nízkej hladine cukru v krvi by nemala byť príliš dlhá a dbajte na to, aby sa telu doplnila energia).





31. HEMIPLÉGIA:

Fúkajte na celé telo, najprv na dlane a chodidlá. Chodidlá, ruky aj nohy, vrátane lymfatickej oblasti na 30 minút, potom hlavu a zadnú časť hlavy, krk 30 minút.

32. NA ODSTRAŇOVANIE CHLADU A VLHKOSTI:

Najprv 20 minút fúkajte dlane a chodidlá, potom 30 minút fúkajte celý chrbát, viac na slezinu, oblasť žalúdka a pupka. Spolu 50 minút.





33. UŠI:

Najskôr 20 minút ošetríte oblasť krku, pása a obličiek, potom 25 minút uši, spolu 45 minút. (Časté fúkanie do uší môže regulovať funkciu viscerálnej oblasti).

34. KAŠEL A PRECHLADNUTIE:

Fúkajte celý chrbát a krk, viac oblasť stredu tela a brucha, prednú a zadnú časť pľúc počas 25 minút. Potom fúkajte celý krk ďalších 20 minút, spolu 45 minút.





35. Oživenie obličiek a jangu :

Najprv fúkajte 20 minút na dlane a chodidlá, potom 30 minút fúkajte na chrbát, fúkajte viac na stred, obličky a potom na pupok.



POKYNY:

Skladujte na suchom, čistom mieste, chránenom pred priamym slnečným svetlom, pri teplote maximálne 25 stupňov, vlhkosť by nemala prekročiť 75 %.

Pozor!

Táto pomôcka nie je špecializovaná zdravotnícka pomôcka. Ak trpíte nejakým ochorením, určite sa poraďte so svojím lekárom.

Záruka je 24 mesiacov od dátumu nákupu + 1 mesiac na dodanie a nezahŕňa čas, kedy bol tovar na sklade.



Existuje tisíc chorôb, ale len
jedno zdravie.

Carl Ludwig Börne (1786 – 1837)
nemecký novinár



WHIEDA

Medzinárodná asociácia
Zdravie a prosperita

Váš osobný poradca



